

relax.



RELAX UND RELAX 2. RUHELIEGEN FÜR WOHNEN, PFLEGE UND KLINIK.



GREINER

ambient care.



GREINER LIEGEN, RUHESELSEL UND -STÜHLE FÜR DIE ALTENPFLEGE UND MOBILISATION.

Mit gutem Sitz wird vieles leichter – Entspannung pur ist Lebensqualität. Sitz- und Liegekomfort über kürzere und längere Abschnitte eines lebendigen Tagesablaufs tragen in hohem Maß zu Wohlbefinden und Zufriedenheit älterer Menschen in der Pflege bei. Zugleich entlasten zufriedene Bewohner und Patienten das Pflegepersonal ganz enorm. Menschen brauchen Pflege aus verschiedenen Gründen: nach einer längeren Zeit im Krankenhaus; wenn es ihnen schwer fällt, allein zurechtzukommen; wenn die geistigen Kräfte nachlassen. In vielen Bereichen moderner Pflegeeinrichtungen schaffen GREINER Ruhesessel und -liegen eine neue Form von Wohn- und Pflegekultur in ansprechendem Ambiente. Das Spektrum reicht von der Tagespflege über das Betreute Wohnen bis zur geriatrischen Pflege – von Ruhe und Entspannung bis zu Mobilisation und Transport.



CareLine.
Pflege- und Mobilisationsstuhl.
Siehe Website.

RELAX UND RELAX 2.

Design, Komfort und Sicherheit definieren den Wohlfühlfaktor und die Akzeptanz von Pflegesesseln und Ruheliegen. Mit komfortabler Polsterung, ansprechender Farbwahl der Bezüge, einfacher Einstellung der Sitz- und Liegeposition, sowie Zubehör wie einem aufsetzbaren Holztisch, finden die formschön designten GREINER Sitzmöbel ihren Platz als prägende Elemente in Zimmern und Gemeinschaftsräumen. RELAX und RELAX 2 wurden gezielt für die Wohn- und Betreuungsbedürfnisse in Alten- und Pflegeeinrichtungen entwickelt, kommen aber auch häufig in Kliniken zum Einsatz. Sitz- und Liegekomfort für die Bewohner verbinden sich ideal mit den betreuungsseitigen Anforderungen an Stabilität, Sicherheit und Hygiene.

Ruhesessel und -liegen RELAX und RELAX 2

- ◆ Breite Auswahl durch Modelle mit manueller oder elektrischer Einstellung der Liegeposition, feststehende oder mobile Ausführung, sowie vielseitiges Zubehör
- ◆ Hoher Komfort durch stufenlos verstellbare Rückenlehne und Beinauflage bis zur Ruhelage, ergonomische Form, Polsterung mit Visco-Schaum, sowie optional Premium-Bezugsstoffe in vielen Farben
- ◆ Angenehmes Wohngefühl durch die Kombination von natürlichem Buchenholz mit ansprechend designten und hygienisch pflegeleichten Oberflächen – beschichtet mit DD-Lack
- ◆ Stabile Armlehnen in geschwungener Form geben Sicherheit und erleichtern das Aufrichten aus der Ruheposition
- ◆ Pflegeleichte Reinigung durch abnehmbare Sitzpolster und Bezüge



RELAX. RUHELIEGE FÜR WOHNEN, PFLEGE UND MOBILISATION.

Die Ruheliege RELAX sorgt rundum für Behaglichkeit. Rückenlehne und Beinauflage sind stufenlos und synchron um circa 50° bis zur Ruhelage verstellbar, wahlweise elektrisch oder manuell über eine Gasfeder. Zudem ist die separate Verstellung des Beinteils um bis zu 90° möglich. In Relaxposition hebt sich das Sitzpolster vorne um 10° und verhindert somit das Abrutschen der sitzenden Person. Besondere Entspannung bringt die Schaukelwippen-Funktion, die einfach über den Verstellhebel unter der Armlehne bedient wird. Sitzpolster und Bezug sind abnehmbar. Die festen und weit nach unten gezogenen Armlehnen geben Sicherheit und Komfort beim Liegen, die abgerundeten Griffknäufe vorne unterstützen das Aufrichten beim Aufstehen. RELAX gibt es als Standmodell und fahrbar auf Doppelaufrollen. Diese sind hinten feststellbar.



Mobilität mit RELAX in der Pflege



RELAX mit aufgesetztem Patiententisch



RELAX ohne Seitenteile in Ruheposition



Wohlfühlmosphäre mit RELAX in der Pflege oder Klinik



Kopfpolster mit Seitenführung (Zubehör)



Vielfältige Farbvarianten in den Bezugsstoffen compact und premium

relax – Zubehör

• Bezugsstoffe	Premium-Material nach Farbkarte, auch für Kopfpolster und Armauflagen
• Kopfpolster	mit/ohne Seitenführung
• Armauflagen	gepolstert (Paar)
• Seitenteile	geschlossen, zur seitlichen Abstützung (Paar)
• Stützpolster	Fixierung Rücken (Paar)
• Schubbügel	Buche
• Patiententisch	Buche Schichtholz, abnehmbar

Maße und technische Daten

• Sitzbreite	48 cm
• Sitztiefe	49 cm
• Gesamttiefe in Grundstellung	81 cm
• Gesamttiefe in Liegeposition	160 cm
• Gesamthöhe in Grundstellung	119 cm
• Gesamthöhe in Liegeposition	90 cm
• Liegefläche	170 cm
• Einstiegshöhe	46 cm
• Maximales Patientengewicht	125 kg
• Gewicht	30 – 32 kg
• Gesamtbreite	63 cm
• Rollendurchmesser	75 mm

relax 2.



RELAX 2. PREMIUM RUHESELSEL FÜR WOHNEN UND PFLEGE.

RELAX 2 besteht in Form eines Sessels durch eine völlig neuartige Technik der Rückenlehnen- und Beinauflagenverstellung über zwei Gasdruckfedern, die sowohl eine synchrone Verstellung der Liegefläche, als auch eine separate Verstellung der Beinauflage in jeder Position zulassen. Die elektrisch verstellbare Variante ist mit 2 Motoren ausgestattet. Ein leistungsstarker Akku gewährleistet die erforderliche Mobilität. Die Erweiterung der Rückenlehnenverstellung in Richtung waagrechte Liegeposition, der im Polster eingelassene viskoelastische Schaum, ebenso wie die ergonomische Formgebung, bieten ein Höchstmaß an Sitz- und Liegekomfort. Die Seitenteile aus Buchenholz, wischdesinfektionsbeständig mit DD-Lack lackiert, sind ansprechend im Farbton Havanna gebeizt. Der weite Schwung der Armlehnen über die Rückenlehne hinaus bietet eine vollständige Unterstützung der Arme auch im Liegen und erleichtert das Aufrichten aus der Ruheposition. 75-mm-Schwenkrollen, hinten feststellbar, und ein ergonomisch angebrachter Schubbügel (Zubehör) erleichtern die Mobilität für das Pflegeteam.



Mobilität mit RELAX 2 in der Pflege



RELAX 2 mit aufgesetztem Patiententisch




RELAX 2 ohne Seitenteile in Ruheposition



Wohlfühlmosphäre mit RELAX 2 in der Pflege oder Klinik



Ergonomisch angebrachter Schubbügel (Zubehör)

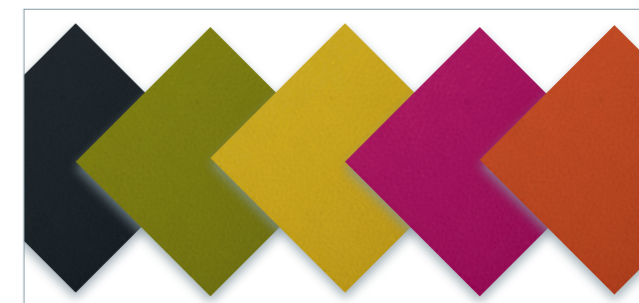

Vielfältige Farbvarianten in den Bezugsstoffen compact und premium

relax 2 – Zubehör

• Bezugsstoffe	Premium-Material nach Farbkarte, auch für Kopfpolster und Armauflagen
• Kopfpolster	verschiebbar und abnehmbar
• Armauflagen	gepolstert (Paar)
• Seitenteile	geschlossen, zur seitlichen Abstützung (Paar)
• Stützpolster	Fixierung Rücken (Paar)
• Schubbügel	Buche Havanna gebeizt
• Patiententisch	Buche Schichtholz, abnehmbar

Maße und technische Daten

• Sitzbreite	51,5 cm
• Sitztiefe	48,5 cm
• Gesamttiefe in Grundstellung	82 cm
• Gesamttiefe in Liegeposition	169 cm
• Gesamthöhe in Grundstellung	130 cm
• Gesamthöhe in Liegeposition	87 cm
• Liegefläche	180 cm
• Einstiegshöhe	47 cm
• Maximales Patientengewicht	150 kg
• Gewicht	55 – 65 kg
• Gesamtbreite	72 cm
• Rollendurchmesser	75 mm



we design quality.

Die Freude am gesunden und angenehmen Sitzen treibt uns seit 1922 an. Seit vielen Jahrzehnten auch mit qualitativ und technisch hochwertigen Liegen im Bereich medbest: Innovative Entwicklungen „made in Germany“ für Untersuchung, Dialyse, Onkologie, Blutabnahme, Pflege und Transport. Bestätigt wird unser Qualitätsversprechen durch ein unabhängig geprüftes Qualitätssicherungssystem – GREINER ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und 13485.



Prüfzeichen für
Qualitätsmanagement-System



GREINER

GREINER GmbH
Wettestraße 1 · 74385 Pleidelsheim · Germany
T +49 7144 81120 · F +49 7144 8112 99
info@greiner-gmbh.de · www.greiner-gmbh.de